

- Remplir le **formulaire de demande d'analyses** et le mettre avec le **formulaire de notification (OCR-SA-FOR-600)** dans un sachet plastique.
- Mettre tous les sachets en plastique dans la boîte de transport d'échantillons pour les remettre à un centre de ramassage pour gibier ou au LVA.

! Tous les prélèvements et les formulaires doivent rester propres.

Emballage du cadavre

Pour transporter le cadavre correctement, procédez comme suit :

- Envelopper le cadavre dans le matériel d'emballage en y enfermant les gants et surbottes.
- Nouer, si possible, les bords de la bâche libres et fixer les à l'aide des clips de fixation (colsons).
- Si le cadavre entier est envoyé, attacher le sachet plastique contenant le **formulaire de notification OCR-SA-FOR-600** au cadavre.



Envoi des échantillons

Les échantillons et/ou le cadavre peuvent être déposés sur rendez-vous dans un Centre de ramassage pour gibier ou au LVA (1, rue Louis Rech, L-3555 Dudelange).

PLUS D'INFORMATIONS

Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA)

Tél. : 247-82539


E-mail: info@alva.etat.lu

Laboratoire vétérinaire et alimentaire (LVA)

Tél. : 247-82544

E-mail: laboratoire@alva.etat.lu

www.landwirtschaft.lu

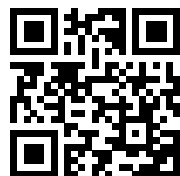

Vidéo Youtube « Surveillance de la Peste Porcine Africaine – Un guide étape par étape pour la gestion et l'échantillonnage des sangliers morts »



Plus d'informations sur la santé animale sur le portail de l'agriculture incluant le formulaire « Notification de découverte d'un cadavre de sanglier - OCR-SA-FOR-600 » et la demande d'analyses PPA au Laboratoire vétérinaire et alimentaire (LVA)

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture

ALVA - Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire

Fotos: Adobe Stock/ALVA

Ausgabe: 3/2025



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture,
de l'Alimentation et de la Viticulture

Administration luxembourgeoise vétérinaire
et alimentaire



QUE FAIRE EN CAS DE DÉCOUVERTE D'UN CADAVRE DE SANGLIER ?

Lors de la découverte d'un sanglier mort, l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA) doit être informée. Pour déterminer si le sanglier était atteint de la peste porcine africaine (PPA), il convient de prélever un échantillon de la rate et, si possible, un échantillon de sang pour faire analyser par le Laboratoire vétérinaire et alimentaire (LVA).

! Si aucun de ces échantillons ne peut être prélevé, veuillez contacter le LVA afin de réaliser un autre prélèvement ou d'envoyer le cadavre entier (247-82544). Après le prélèvement des échantillons, le cadavre doit être éliminé de manière appropriée.

MODE D'EMPLOI

Remplir le **formulaire « Notification de découverte d'un cadavre de sanglier - OCR-SA-FOR-600 »**, envoyer une photo de celui-ci aux adresses (e-mail) mentionnées sur ce formulaire et le mettre dans le sachet plastique fourni dans le kit. Attachez ce sachet au cadavre emballé ou placez-le dans la boîte de transport d'échantillons (UN3373).

Les étapes suivantes sont à suivre **dans tous les cas** :

- Mettre des gants à usage unique et recouvrir ses chaussures de surbottes.
- Déposer le cadavre sur une bâche en plastique suffisamment grande.
- Fixer une marque d'identification au sanglier.

Pour les prélèvements, il est préférable d'être à deux personnes (un préleveur et un assistant qui reste propre). **Avant tout prélèvement**, le tube EDTA et le pot en plastique sont à identifier (le numéro d'identification du sanglier peut être utilisé à cet effet).

Rate (échantillon obligatoire)

- Mettre des gants à usage unique.
- Ouvrir le couvercle du pot.
- Ouvrir la cavité abdominale (**côté gauche**, dernier ou avant-dernier espace intercostal, tiers supérieur) à l'aide d'un scalpel.



- Retirer la rate (organe violet foncé).
- Couper la moitié de la rate (au minimum 5x2cm) et la mettre dans le pot en plastique en évitant de toucher l'extérieur du pot.



Échantillon de sang (si possible)

- Mettre des gants à usage unique.
- Ouvrir le bouchon du tube EDTA (violet).
- Pré-ouvrir le sachet plastique prévu pour les déchets.
- Retirer du sang par les ouvertures du cadavre, p. ex. d'une plaie ou d'autres ouvertures à l'aide d'une seringue.



- Remplir le tube EDTA avec le sang collecté (au minimum 2 ml) en évitant de contaminer l'extérieur avec du sang.
- Fermer le tube et le retourner au minimum 4 fois pour homogénéiser l'échantillon.

Étapes suivantes

Après la réalisation des prélèvements de sang et de rate, suivez les étapes ci-dessous :

- Éliminer le scalpel (dans une boîte d'élimination sécurisée ou la boîte de transport d'échantillons).
- Éliminer le matériel à usage unique (mettre les gants avec la seringue et l'emballage dans le sachet en plastique pour déchets).
- Mettre les échantillons dans le sachet en plastique de prélèvement avec le papier absorbant et garder les échantillons au frais.